


plusoptiXconnect

1 Description

plusoptiXconnect est un pilote universel d'imprimante pour PC sous Windows. Ce logiciel permet d'imprimer des protocoles de mesure ou de dépistage réalisés avec des appareils Plusoptix (documents PDF) sur une imprimante quelconque raccordée à votre PC. L'accès aux documents PDF auparavant enregistrés sur le support de stockage externe (16 : USB, 12C : carte SD), se fait par le réseau informatique.

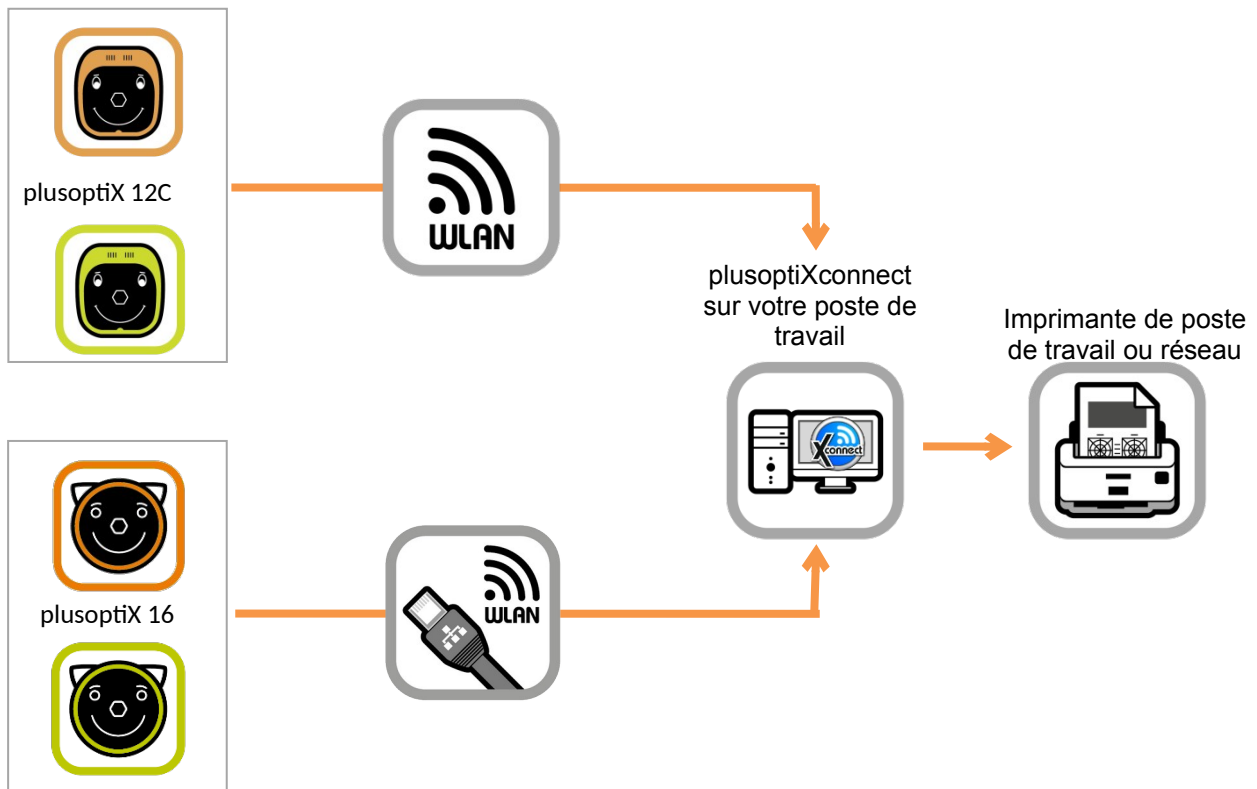


2 Conditions requises

- ✗ « PlusoptiX 16 » à l'aide d'une clé USB insérée ou « plusoptiX 12C » à l'aide d'une carte SD insérée
- ✗ Serveur DHCP pour l'attribution automatique d'adresses IP
- ✗ Connexion réseau entre l'appareil Plusoptix et votre PC sous Windows
- ✗ Système d'exploitation Windows 7, 8, 8.1 ou 10
- ✗ Une imprimante de poste de travail ou réseau reliée à votre PC sous Windows

3 Installation

plusoptiXconnect peut être téléchargé sur notre site Web www.plusoptix.com, sur [support](#). Lancez le logiciel et suivez les instructions de la routine d'installation. Confirmez tous les réglages.

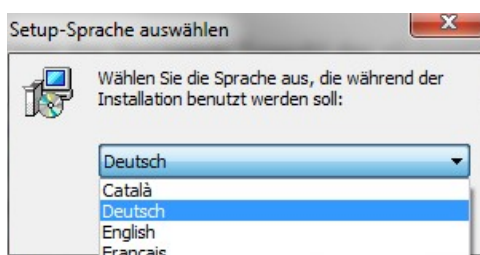

Remarque :

Au troisième message d'installation, vous avez la possibilité de sélectionner la langue de votre choix. Confirmez votre choix en cliquant sur le bouton « OK ».

Figure 1: Sélection de la langue

Au cours de l'installation de plusoptiXconnect, les programmes externes « Ghostscript » et « GhostView » sont installés automatiquement. Ce sont des modules indispensables pour pouvoir utiliser plusoptiXconnect.

Pour désinstaller plusoptiXconnect, exécutez le fichier « Uninstall » enregistré dans le dossier du programme. Confirmez le message pour supprimer tous ses composants.

4 Utilisation

Lancez plusoptiXconnect. Si l'appareil Plusoptix bénéficie d'une connexion réseau active, le logiciel recherche tous les fichiers PDF enregistrés sur les supports de stockage externes.

Uniquement S12C et S16 :

Pour S12C et S16, le système enregistre également le résultat du dépistage dans le nom du fichier. En fonction du résultat de dépistage, le fichier PDF est alors représenté en vert (« validé »), rouge (« adresser ») ou jaune (mesure incomplète). Dès que le logiciel détecte un résultat de dépistage dans le nom du fichier, la fonction de filtrage est activée (voir « Sélection de fichiers PDF pour impression (uniquement pour les dispositifs de dépistage de la vision plusoptiX S12C et plusoptiX S16) »).



Remarque :

Si aucun fichier PDF n'a encore été enregistré sur les supports externes de mémoire, la fonction de filtrage n'est pas activée. Dans ce cas, appuyez, avant la première mesure, sur le déclencheur de votre appareil de dépistage puis annulez la mesure en effleurant l'écran. Le logiciel détecte alors le résultat du dépistage contenu dans le nom du fichier et la fonction de filtrage est à nouveau affichée.

The screenshot shows the plusoptiXconnect software interface. On the left, there are labels for device recognition and file selection. On the right, there are labels for connection status, file status, printer selection, and printing options. The interface includes a list of detected devices, a file list with status indicators, a printer selection dropdown, and a printing options section.

- Appareil reconnu: vert: A12C orange: S12C
- Nom d'hôte (1)
- Appareil reconnu: vert: A12C orange: S12C
- sélectionner des rapports du dépistage (S12C et S16 seulement)
- Impression automatique (3)
- Affichage automatique des PDF (4)
- déplacer le PDF vers la sélection dossier automatiquement (5)
- supprimer automatiquement le PDF (6)
- état de la connexion (2)
- validé (7)
- adresser (8)
- mesure incomplète (9)
- Imprimante sélectionnée (10)
- nombre de copies (11)
- afficher les fichiers PDF sélectionnés (12)
- statistique (Screener)
- version

Figure 2: Interface utilisateur plusoptiXconnect avec fonction de filtrage

Établissement de la connexion

Chaque appareil Plusoptix dispose de ce qu'on appelle un nom d'hôte. Inscrivez le nom d'hôte de votre appareil dans la ligne représentée (1). Le logiciel recherche alors continuellement de nouveaux fichiers PDF enregistrés sur les appareils possédant ce nom d'hôte.

plusoptiX 16 : Le nom d'hôte est « px16-xxxx ». Le nom d'hôte ne peut pas être adapté manuellement.

plusoptiX 12C : Depuis la version 6.1.11.0 du logiciel, les quatre derniers chiffres du numéro de série figurent dans le nom d'hôte : « plusoptiX12-xxxx ». Depuis la version 6.1.12.0 du logiciel, le nom d'hôte a été raccourci à « px12-xxxx ». Le nom d'hôte ne peut pas être adapté manuellement.



Remarque :

Si la connexion au réseau est réussie, une coche verte apparaît dans plusoptiXconnect (2). Si un X rouge apparaît à la place, vérifiez les points suivants:

- ✗ Aucune mémoire externe (clé USB / carte SD) n'est connectée à l'appareil.
- ✗ Vous avez entré le mauvais nom d'hôte (1).
- ✗ Le WiFi est désactivé ou aucun câble LAN n'est connecté à l'appareil.
- ✗ L'appareil est hors de portée WIFI (plusoptiX 12C).
- ✗ Le pare-feu Windows n'a pas autorisé l'accès à l'appareil.

Poursuite du traitement automatique des fichiers PDF reçus

Après avoir terminé une mesure, un protocole de mesure / de dépistage est enregistré sur le support externe de mémoire de l'appareil Plusoptix.



Remarque:

Lorsqu'une mesure est réalisée anonymement, le protocole de mesure / de dépistage doit être enregistré manuellement. Lisez à ce sujet le mode d'emploi de votre appareil Plusoptix.

Ce rapport de mesure est ensuite reçu par plusoptiXconnect sous forme d'un nouveau fichier PDF et peut alors :

- ✗ être imprimé automatiquement sur une imprimante connectée à votre ordinateur. Pour ce faire, cochez la case correspondante (3). L'imprimante peut être sélectionnée individuellement avec le bouton (4). Vous pouvez également régler le nombre de copies souhaitées (11)
- ✗ s'afficher automatiquement sous forme de fichier PDF sur le bureau (5)
- ✗ déplacer et stocker automatiquement une copie du PDF dans le dossier sélectionné (fonction de déplacement) (5)
- ✗ supprimer le PDF copié (fonction de sécurité des données) (6) - uniquement en combinaison avec (5)



Remarque :

Les paramètres ne peuvent pas être modifiés pour les travaux d'impression déjà traités.

Filtrer les fichiers PDF avant impression (uniquement pour les appareils de dépistage plusoptiX S12C et plusoptiX S16)

Pour imprimer exclusivement les protocoles de dépistage avec un même résultat de dépistage donné, les protocoles de dépistage peuvent, sur le S12 et le S16, être filtrés individuellement par résultats de dépistage. Pour ce faire, activez ou désactivez la case à cocher du symbole correspondant :

- ✗ Protocoles de dépistage avec résultat de dépistage « validé » (7)
- ✗ Protocoles de dépistage avec résultat de dépistage « adresser » (8)
- ✗ Protocoles de dépistage d'une mesure incomplète (9)

1) px16-1234 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) PDFCreator 11) 1